

## DATASHEET

AmbuMan® SAM iQF is een betrouwbare, kostenefficiënte trainingspop die is ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor de BLS-algoritmetraining.

En met de nieuwe iQF-app kunt u nu training bieden met een hoge mate van precisie voor reanimatieprestaties bij volwassenen met een hartstilstand.


### Reanimatie wordt de belangrijkste factor wanneer een persoon lijdt aan een hartstilstand

Bij een hartstilstand stopt de bloedsomloop naar het lichaam, de hersenen, de longen en de organen. Zonder behandeling zal de patiënt overlijden. Met hartmassage wordt het bloed door het lichaam gecirculeerd. Daarom is het belangrijk dat mensen in deze discipline worden opgeleid.

### iQF, Training die werkt voor het leven

Gezondheidsinstructeurs helpen met trainingen. De iQF-applicatie bevat gegevensgestuurde informatie en nauwkeurige metingen van relevante reanimatieparameters.

Help uw studenten om op een leuke manier de perfecte reanimatie uit te voeren met de mogelijkheid van spelletjes en wedstrijden.

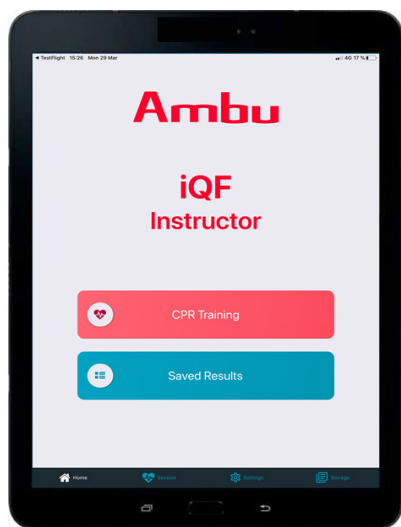

Ambu iQF Instructeur

### Realistische beademing en AED-training

De AmbuMan SAM biedt studenten een realistische beademingservaring. De juiste compressiediepte en het vereiste ventilatievolume kunnen worden gecontroleerd door het mechanische controle-instrument op de trainingspop. De gesloten torsovorm heeft alle nauwkeurige anatomische kenmerken waardoor studenten de BLS-techniek volledig kunnen leren. Dit omvat het gebruik van semi-automatische defibrillators (AED's) en de positionering van de bijbehorende elektroden. Het unieke hygiënesysteem van Ambu voorkomt bovendien kruisbesmetting.

# AmbuMan® SAM iQF



## BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Robuuste en betrouwbare, kostenefficiënte BLS-trainingspop met anatomisch correct gesloten torso
- Visuele feedback ingebouwd in de torso van de pop biedt onmiddellijke feedback over de compressieamplitude
- Ambu hygiënisch systeem voor mond-op-mond- en mond-op-neusbeademing
- Gemakkelijke AED-training

## TRAIN IQF, TRAIN FOR LIFE

Gedetailleerde visualisatie van de borstcompressie-diepte en het juiste ventilatievolume met de iQF-app voor instructeurs en studenten. Verbonden via Bluetooth®.

# Ambu

## SPECIFICATIES

Gewicht	4,5 kg
Lengte	45 cm
Breedte	37 cm
Hoogte	25 cm
Max. beademingsvolume	1800 ml
Maximale compressiediepte	7 cm

## MATERIALEN

Basiseenheid	ABS (acrylonitrilbutadiëenstyreen)
Hoofd	Polyvinylchloride, hard
Borsthuid	Polyvinylchloride, zacht
Gelaatsmasker	Polyvinylchloride, zacht
Luchtzakje, wegwerpbaar	Polyethyleen
Trainingspak	Polyester
Draagtas	PVC-gecoat nylon

## BESTELGEGEVENS


### Artikelnr.

A268 003 000	AmbuMan SAM met 25 luchtzakjes en 1 gelaatsmasker, meegeleverd in een zachte draagtas
234000702	Luchtzakjes (set van 100)
234000703	Gelaatsstuk (set van 5)


\* Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, inc.



Hygiënesysteem

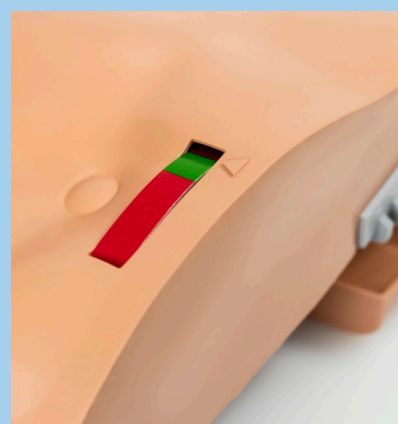

Indicator van compressiediepte

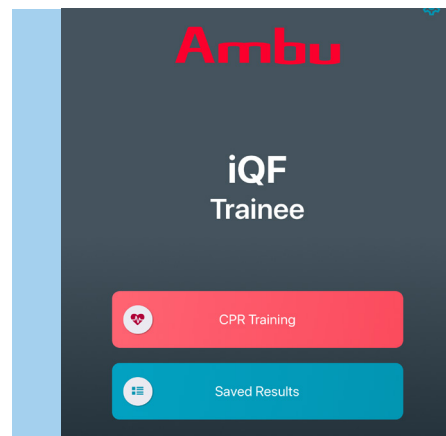

Ambu iQF Student

# Ambu

■ Ambu BV  
Schiphol boulevard 127  
1118 BG Schiphol,  
Nederland  
T +31 182 526 060  
F +31 182 526 060  
ambu.com