

HeartSine Samaritan PAD 350P/500P

AED's die levens redden

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan bij een hartstilstand een elektrische schok afgeven die het hart weer normaal laat kloppen. Bij reanimatie en defibrillatie met een AED stijgt de overlevingskans van 10% naar 70%. Een AED kan door iedereen veilig gebruikt worden: thuis, op het werk en op straat.

Elk jaar krijgen 16.000 mensen in Nederland een hartstilstand. De meeste incidenten gebeuren thuis of op het werk. De enige manier om het hart weer normaal te laten kloppen, is door het toedienen van een elektrische schok.

Elke seconde telt

Na een hartstilstand daalt de overlevingskans van het slachtoffer met 10% per minuut. Maar professionele hulp is vaak pas na vijftien minuten aanwezig. Vaak is dit te laat. Als u binnen zes minuten de AED kunt inzetten stijgt de overlevingskans van 10% naar 70%. De snelle beschikbaarheid van een AED is dus van levensbelang.

Samaritan PAD 350P

De Samaritan 350P is één van de meest verkochte AED's ter wereld. Vanaf het moment dat u de AED aanzet geeft deze door middel van gesproken instructies stap voor stap aan wat u moet doen. Daarnaast heeft de AED oplichtende pictogrammen die aangeven in welke fase u zit: ideaal voor rumoerige omgevingen. Voor iedere AED geldt dat de batterij en elektroden periodiek vervangen moeten worden. De Samaritan 350P is voorzien van een batterij- en elektrodencombinatie (PadPak) die maar één keer per vier jaar vervangen hoeft te worden. De onderhoudskosten zijn hierdoor de laagste in de markt. Verder heeft de 350P een IP-waarde van 56. Hierdoor kan de AED zelfs in een zware regenbui gebruikt worden.

Voert automatische zelftesten uit.

Uitvoerbaar met kinderelektroden.


Oplopend energieniveau: 150J, 150J en 200J voor volgende schokken volgens NRR protocol.

Metronoom voor begeleiding reanimatie.

Visuele en Nederlands gesproken instructies, ook in het donker bruikbaar.

Degelijke behuizing, bestand tegen stof en vocht volgens IP56.


Elektroden direct gebruiksklaar en snel te wisselen.

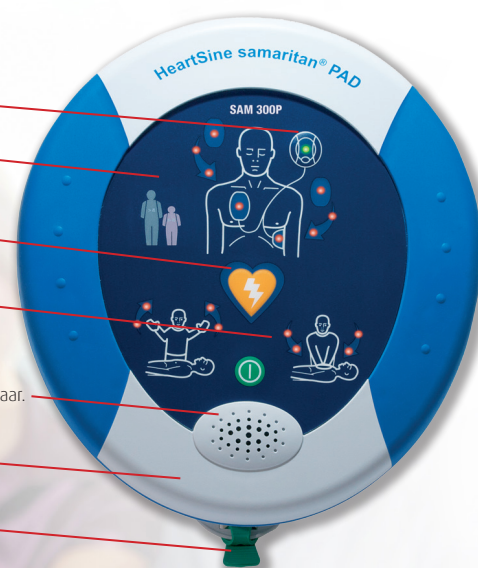

HeartSine®
AED'S DIE LEVENS REDDEN

Samaritan PAD 500P

De Samaritan 500P heeft dezelfde technische specificaties als de Samaritan 350P, maar meet daarnaast of er tijdens de hartmassage voldoende bloed uit het hart wordt gepompt. Op basis van deze meting geeft de 500P aan of er dieper of sneller gemasseerd moet worden. Dit gebeurt door middel van simpele instructies zoals 'Druk sneller', 'Druk harder' of 'Druk langzamer'. Daarnaast geven oplichtende LED's aan of de hartmassage voldoende diep wordt uitgevoerd. Hiermee bent u verzekerd van een optimale reanimatie.

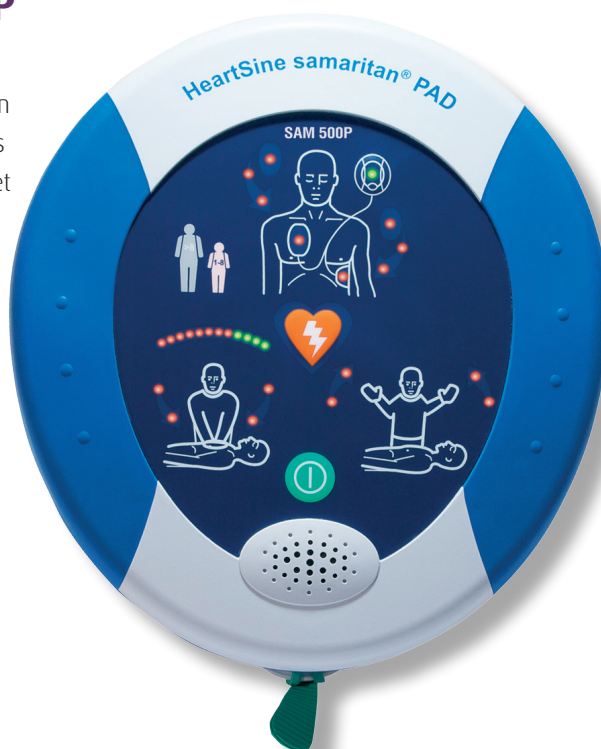

- Masseert u niet? De AED zal zeggen 'Start reanimatie'.
 - Masseert u niet hard genoeg? De AED zal zeggen 'Druk harder'.
 - Masseert u niet snel genoeg? De AED zal zeggen 'Druk sneller'.
 - Masseert u te snel? De AED zal zeggen 'Druk langzamer'.
- Daarnaast geeft een metronoom door middel van piepjes aan in welk tempo er gemasseerd moet worden.
- Voert u de compressies met de juiste snelheid en diepte uit? Dan zal de AED 'Goede compressies' zeggen.



Druk sneller
Druk langzamer
Druk harder
Goede compressies

Onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van de reanimatie nauw samenhangt met de overlevingskansen van het slachtoffer. 70% van alle reanimaties wordt niet goed uitgevoerd.

Inclusief draagtas




Aparte trainingsunit leverbaar



PadPak snel te wisselen



Kinderelektroden leverbaar

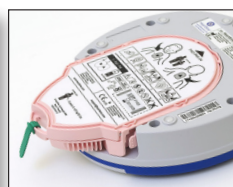

Metalen opbergkast met alarm



Perspex ophangsysteem



Voordelen van de Samaritan PAD serie

- Eenvoudig te bedienen door pictogrammen en Nederlands gesproken instructies
- Laagste kosten voor vervanging batterij en elektroden
- Automatische zelftest, groene LED geeft aan of de AED klaar is voor gebruik
- Hoge waterbestendigheid (IP 56). Hierdoor ook geschikt voor sportclubs, watersport en buitengebruik
- Zeer compact en licht (1,1 kg)
- Europees product met 10 jaar garantie
- Oplopend schokniveau, voldoet aan de nieuwste ERC 2010 richtlijn voor AED's
- Verkrijgbaar met kinderelektroden



HeartSine®
www.heartsine.nl